


KOAGÜLOMETRE CA 54

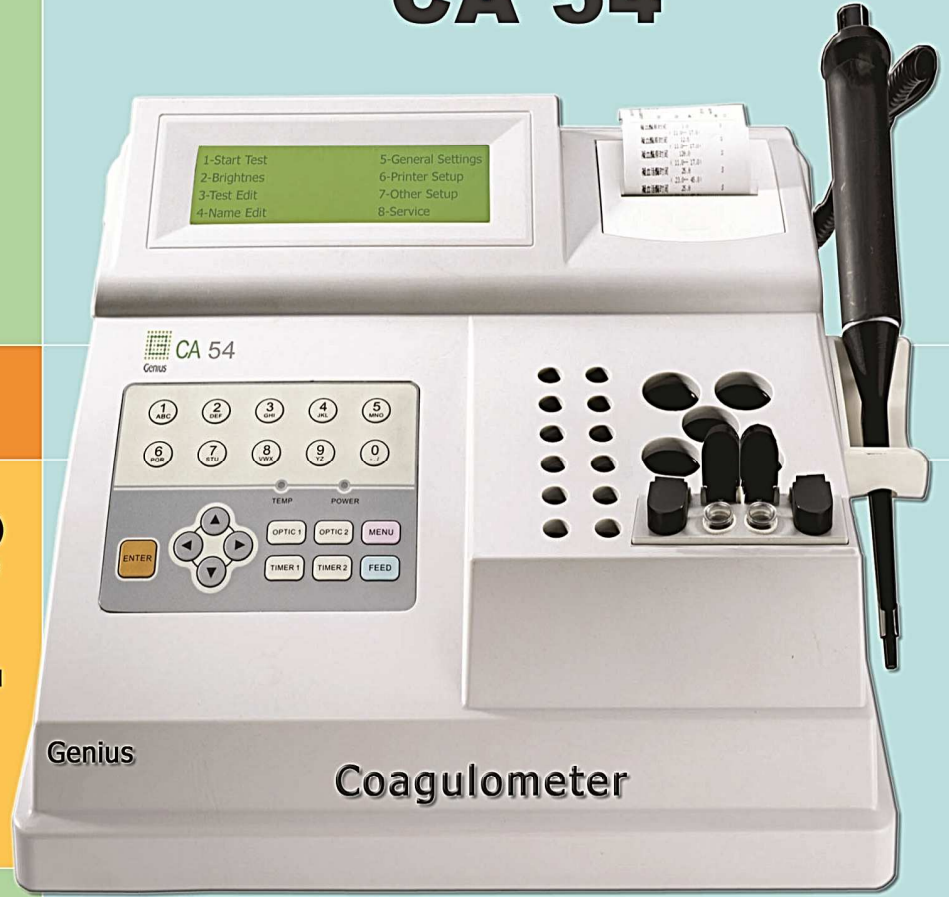

- **Reaktif Volümü:** Minimum reaktif volümü:40 mikrolitre. (Semimikro)
- **Numune Volümü:**Minimum numune volümü:40 mikrolitre.
- **Hafıza:** Açılıp kapanmadan etkilenmeyen 10.000 test hafızası
- **Hesaplamalı ölçüm-analiz parametreleri:** S, %, PTR, INR, Fibrinojen-mg,
*Bilyasız deteksiyon teknolojisi

GENIUS CA54 DÖRT KANALLI KOAGÜLOMETRE

TEKNİK ÖZELLİKLER

- **Ölçüm Tekniği:**
 - *Nefalometrik, ışık dağılımı-saçılımı teknolojisi
 - *Otomatik sıfır-başlangıç noktası belirleme. Numune ve reaktif ekleme hatalarını otomatik giderme
 - *Okuma dalga boyu:470 nm
- **Işık kaynağı:** Soğuk, foto-optik, uzun ömürlü ampul
- **Algılayıcı:** Lipemik, ikterik, hemolitik plazmalar gibi turbidimetrik hata kaynaklarının oluşturacağı sistematik hatalardan arındırılmış dispersiyeye ışık algılayıcı sistemle yüksek tekrarlanabilirlik ve presizyon değerleri
- **Test Kanalları:** Dört kanalda aynı anda veya farklı zamanlarda simultane, tek tek çalışma imkânı. Dört kanalı aynı anda tek ekrandan gözlemlenme özelliği
- **İnkübatör:** 28 Numune ve reaktif için inkübasyon özelliği
- **Ölçüm Pipetörü:** Cihaz için kofigüre edilmiş mikropipet.
- **Test metotları ve numune ekleme için kolaylaştırılmış, hızlandırılmış kullanıcı ara yüzü**
- **Kalibrasyon:** Tek noktalı, çok noktalı manüel-otomatik kalibrasyon yapma ve kalibrasyon eğrisi oluşturma seçenekleri
- **Kalite Kontrol (QC):** Kalite kontrol eğrisi oluşturma
- **Tekrarlanabilirlik:** CV≤%5
- **Printer:** Dâhili termal sessiz yazıcı
- **Numune bilgi girişi:** Kolaylıkla bilgi girişi, girilen bilgilerin düzenlenmesi
- **Bağlantı portu:** RS-232 ile PC senkronizasyonu, HIS-LIS, harici yazıcı
- **Kalite belgeleri:** CE, CMD (TUV)
- **Çalışma şartları:** Isı:10°C-30°C Nem:20%RH-80%RH
- **Voltaj:**220 Volt (85Volt-264 Volt) Giriş voltajına otomatik adaptasyon özelliği.
- **Güç:**80 Watt

Ölçüm parametreleri:

- | | |
|--------------|-------------|
| * PT | * AT-3 |
| * aPTT | * Protein-S |
| * TT | * Protein-C |
| * Fibrinojen | * LA |
| * RepT | * Hep |
| * VT | |

Türkiye Genel Distribütörü

Sezmed Diagnostic A.S.
Kışla Cd. 2/1 Sok. No:6/3-4 Inan İş Merkezi
Yüzyıl/Bağcılar/ İstanbul/TURKEY
Tlf:+90(212)444 08 92Pbx Fax:+90(212) 629 98 89
www.sezmed.com www.archem.com.tr
sezmed@sezmed.com