




SINNOWA

SINO-003 ELEKTROLİT CİHAZI

K⁺, Na⁺, Cl⁻

- Sino 003; ISE (Ion Selective Methode) teknolojisi
- Tam kan, serum, idrarla çalışma.
- Manuel ve otomatik kalibrasyon seçenekleri.
- 150 test, 450 test ve 900 test kapasiteli reaktif paketleri
- Ekonomik reaktif tüketme özelliği. Test başına kullanılan Standart A:1.66 ML, Standart B:0,33 ML.
- Otomasyon sistemine bağlanma.
 - Saatte **40 hasta** çalışma
- Bir aya ait 300 hasta ve kalite kontrol sonuçları
- İnternal termal / dotmatrix printer.

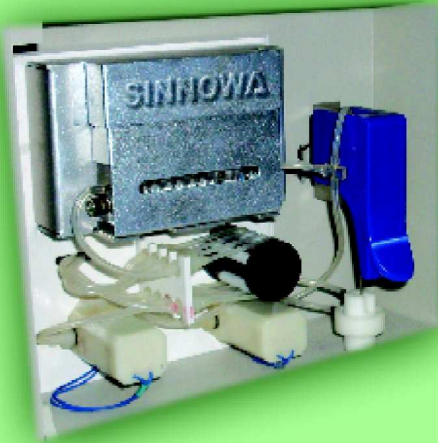

- Kolay ulaşılabilir elektrod seti
- Hızlı bakım ve arıza tesbitine izin veren açılabilir ön kapak
- Tek hamle ile elektrodla tornavida kullanmadan ulaşma ve bakım

Güç	220 ±20 Volt 50 Hz 30 Watt
Ağırlık	8.5 Kg
Ölçüler	30 cm*25 cm*24 cm



TEKNİK ÖZELLİKLER

- Cihaz Aspirasyon probunu otomatik olarak yıkama özelliğine sahiptir.
- Sino 003; ISE (Ion Selective Methode) teknolojisi ile çalışır.
- Tam kan, serum, idrar kullanılabilir.
- Cihaz manuel ve otomatik kalibrasyon seçeneklerine sahiptir. Test çalışma faktörlerine kolaylıkla ulaşılabilir ve değiştirilebilir.
- Elektrodların tamamı kolaylıkla görülebilir, gözlemlenebilir ve tek hamle ile kolayca açılıp temizlenebilir. (Bakıma izin veren elektrod sistemi).
- Geniş kalite kontrol seçenekleri ve bu seçenekleri hafızasında saklama özelliği.
- Cihazın 150 test, 450 test ve 900 test kapasiteli reaktif paketi vardır. Biten reaktif tek başına değiştirme özelliği vardır.
- Ekonomik reaktif tüketme özelliği. Test başına kullanılan Standart A:1.66 ML, Standart B:0,33 ML. (Standby hariç).
- Otomasyon sistemine bağlanma. (HIS/LIS)
- Reaktifleri dışarıda bırakmayan cihaz içi reaktif paketi haznesi vardır.
- 6 satır gösterebilen geniş 240*64 LCD ekran, çok geniş fonksiyonlu yön kursörleri ve test çalışmayı hızlandıran kısa yol test çalışma tuşları.
- Sino 003 de elektrod garantisi 1 yıl, sistem garantisi 2 yıldır.
- Saatte 40 hasta çalışma özelliği.
- Bir aya ait 300 hasta ve kalite kontrol sonuçları.
- Termal / Dotmatrix internal printer vardır.
- Opsiyonel PC bağlantı programı mevcuttur.
- RS-232 portu.

Parametre	Ölçüm Aralığı (mmol/L)	Tekrarlanabilirlik
K ⁺	0.50-10.0	CV≤1.0 %
Na ⁺	30.0-200.0	CV≤1.0 %
Cl ⁻	30.0-200.0	CV≤1.0 %

DİSTRİBÜTÖR
SEZMED
SAĞLIK SANAYİ A.Ş.

Yüzyıl Mahallesi Kışla Caddesi
2/1 Sokak İnan İş Mrk.No:6/2-3-4
Bağcılar / İSTANBUL
Tel : +(90) 212 444 0 892 Pbx
Faks : +(90) 212 629 98 89
www.sezmed.com
sezmed@sezmed.com

BAYİ